

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ELETROCARDIOGRAMA	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.AMB.003-01	01	1/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Agosto 2021	Emissão Inicial	Agosto 2024	
	Primeira Revisão		

1. RESULTADOS ESPERADOS

Estabelecer os critérios e as práticas para orientar as ações que compõem a execução do procedimento de eletrocardiograma para identificarmos as alterações na atividade elétrica cardíaca e auxiliar na conduta médica.

2. RESPONSABILIDADE

Técnicos de Enfermagem;
Enfermeiros.

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

INSTALAÇÃO

- A. Lavar as mãos, conforme protocolo institucional;
- B. Conferir e separar todo material necessário para realização do exame (Aparelho de ECG, Eletrodos, Braçadeiras, luvas de procedimento e Álcool a 70%);
- C. Colocar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
- D. Acolher o paciente;
- E. Informar o procedimento ao paciente;
- F. Cadastrar o paciente através da Ficha do Boletim de Atendimento Ambulatorial – dados individuais, conforme protocolo de segurança do paciente;
- G. Preencher o livro destinado ao cadastro de exames de Eletrocardiograma com data, número do exame, nome do paciente, médico solicitante, Boletim de Atendimento do paciente e telefone, assinatura de quem realizou o exame e assinatura do paciente;
- H. Posicionar o paciente no leito em decúbito dorsal, braços paralelos ao corpo e

Donato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

IT.AMB.003-01

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ELETROCARDIOGRAMA	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.AMB.003-01	01	2/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Agosto 2021	Emissão Inicial	Agosto 2024	
	Primeira Revisão		

pernas em um ângulo de 30°;

Atenção: Evitar usar o gel condutor, pois o seu excesso oxida os eletrodos.

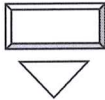- I. Umedecer a pele com álcool a 70% nas áreas de colocação das braçadeiras;
- J. Posicionar as braçadeiras inferiores 1/3 distal face interna dos membros inferiores (trajeto do pulso pedial) - Se paciente amputado as braçadeiras devem ser posicionadas o mais distal possível;
- K. Posicionar as braçadeira conforme derivações torácicas (V1 – 4º espaço intercostal, linha para esternal D; V2 – 4º espaço intercostal, linha para esternal; V3 – Mediana entre V2 e V4; V4 – 5º espaço intercostal, linha hemiclavicular; V5 – 5º espaço intercostal, linha axilar anterior; V6 – 5º espaço intercostal, linha axilar média;
- L. Apertando a tecla 9 para iniciar e apertar o botão  para finalizar;
- M. Ativar o aparelho para registrar o Eletrocardiograma, até que as 12 derivações estejam registradas.

DESINSTALAÇÃO


- A. Desligar o aparelho, retirar cabos e braçadeiras;
- B. Manter o paciente em posição confortável;
- C. Realizar desinfecção dos cabos e braçadeiras com álcool a 70%;
- D. Identificar o eletrocardiograma (com nome, Boletim de Atendimento, data, hora e assinatura do responsável pela realização do exame);
- E. Anexar o Eletrocardiograma em impresso próprio.


Donato





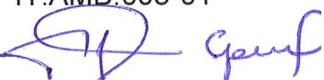

IT.AMB.003-01
 Genf

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ELETROCARDIOGRAMA	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.AMB.003-01	01	3/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Agosto 2021	Emissão Inicial	Agosto 2024	
	Primeira Revisão		

4. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

ORIENTAÇÕES SOBRE O PREPARO

- ✓ Orientar o paciente a não vir em jejum;
- ✓ Orientar o paciente a não usar hidratantes e óleos antes do exame.

5. RISCOS

Riscos Assistenciais

- ✓ Falha no processo de aplicação do protocolo;
- ✓ Evento adverso por falha na técnica de colocação.

Riscos Ocupacionais

- ✓ Não identificados.


Riscos Ambientais

- ✓ Não identificados;
- ✓ Descarte inadequado de resíduos.

6. REFERÊNCIAS


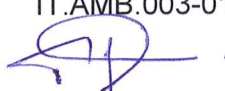
DUBIN, Dale. **Interpretação rápida do ECG**. 3ª Ed. Rio de Janeiro: EPUB, 2005.
NETTINA, Sandra M. **Prática de Enfermagem**. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.


Donato






IT.AMB.003-01


INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Elaborado por:

Gestão
Assistencial

ELETRCARDIOGRAMA

CODIFICAÇÃO

VERSÃO

PÁGINA

IT.AMB.003-01

01

4/4

RESUMO DE REVISÕES

DATA

DESCRIÇÃO

DATA PRÓX. REVISÃO

Agosto 2021

Emissão Inicial

Agosto 2024

Primeira Revisão

CONTROLE DE EMISSÃO

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

APROVADO POR:

Patrícia Barbosa Monteiro
Coordenadora de
Enfermagem do
Ambulatório e da CIHDOTT

Patrícia B. Monteiro
Patrícia Barbosa Monteiro
COREN-PB 279 782 - ENF

Renata Gomes Barreto
Coordenadora da Terapia
Ocupacional e de
Qualidade

Renata Gomes Barreto
Coord. de Terapia Ocupacional / Qualidade
CRETEO 19069-10
Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires

Gilberto Costa Teodoro
Direção Assistencial

Gilberto C. Teodoro
Gilberto C. Teodoro
COREN 392110
DIRETOR ASSISTENCIAL
Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires

Bruno da Silva Brito
Gerente Multidisciplinar e
de Qualidade

Dr. Bruno da Silva Brito
CREITO 171763-F
Gerente Multidisciplinar Qualidade
Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires

Thiago Vila Nova
Direção Técnica

Thiago Vila Nova
Thiago Vila Nova
DIRETOR TÉCNICO
Mat.: 909.222-6
Hosp. Metrop. Dom José Maria Pires

**Kátia Jaqueline da Silva
Cordeiro**
Gerente de Enfermagem

Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro
Gerente de Enfermagem
COREN-PB384.395
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires

**Antônio Cavalcanti
Pedrosa**
Direção Geral

Antônio Pedrosa
Antônio Pedrosa
DIRETOR GERAL
Mat.: 187.750-0
Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires

**Gustavo Soares
Fernandes**
Coordenador Médico do
Ambulatório

Gustavo Soares Fernandes
Gustavo Soares Fernandes
Cardiologia
CRM 7628 / RQE 5504